

CIP 100®**Formulated Alkaline Cleaner****(Detergente alcalino formulato)**

Il detergente alcalino CIP 100 è destinato al settore farmaceutico, biotecnologico, cosmetico, nutraceutico e a tutti gli altri settori che necessitano di un detergente efficace e convalidabile. È formulato con idrossido di potassio, surfattanti, agenti chelanti ed altri componenti detergenti essenziali. Questa ampia gamma di componenti consente una varietà di meccanismi di pulizia. Il detergente possiede un basso potere schiumogeno a tutte le temperature e può essere impiegato sia nella procedura di pulizia “in loco” (CIP) che “non in loco” (COP). Per soddisfare i vostri obiettivi di analisi STERIS rende disponibile un ampio kit di assistenza per la convalida.

Applicazioni



- Strumenti per il trattamento
 - Recipienti per il trattamento
 - Reattori
 - Miscelatori
 - Pastigliatrici
- Lavaggio dei componenti
- Lavaggio delle parti in vetro
- Pulizia ad ultrasuoni

Caratteristiche**Vantaggi**

Detergente alcalino formulato.	Deterge in presenza di una vasta gamma di ambienti chimici. Impiego più sicuro rispetto ai solventi o alle sostanze chimiche d'impiego comune.
Impiega metodi sia specifici che aspecifici per individuare i residui di detergente. Tra i diversi metodi figurano l'HPLC, il TOC, l'IC, ecc.	Contribuisce al processo di convalida eliminando la necessità dei clienti di dover sviluppare metodi di analisi propri.
Prodotto all'interno di una struttura dotata di certificazione FDA ed ISO 9001.	Rispetta il più alto standard di produzione e trattamento.
Risciacquo libero.	Può essere rimosso semplicemente dalle superfici del prodotto, consentendo un risparmio in termini di tempo e di consumo d'acqua.
Completa rintracciabilità dei lotti.	Assicura l'assicurazione qualità (QA) e il controllo qualità (QC).
Contrassegno d'integrità del prodotto.	Garantisce l'integrità della formulazione e la continuità della fornitura futura.
Usare concentrazioni comprese tra l'1 e il 6%.	Consente una pulizia efficiente, limitando i tempi di inattività dell'apparecchiatura con conseguente riduzione dei costi.

Assistenza tecnica

Per la consulenza sui prodotti e sui trattamenti, potete contare su un'équipe di chimici, microbiologi ed ingegneri altamente qualificati e riconosciuti nel settore. L'assistenza tecnica STERIS organizza seminari (in azienda ed esterni) su tematiche incentrate sulle procedure di pulizia e sulla loro convalida (cleaning validation). È stata sviluppata un'ampia varietà di dati tecnici, referti di analisi di laboratorio, metodi analitici e case study tra cui citotossicità, LD 50, compatibilità dei substrati e molti altri.

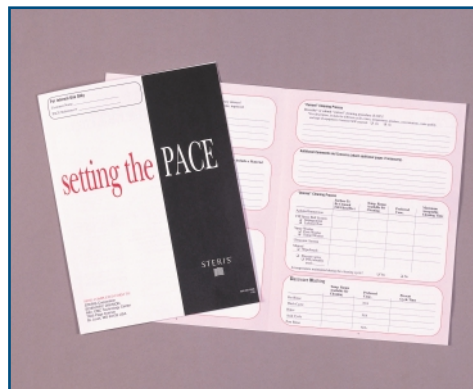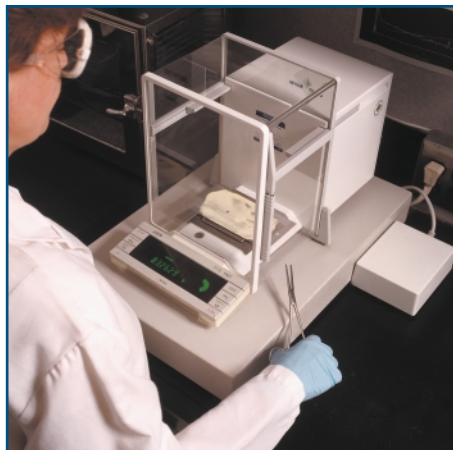

Programma PACE

Con il programma di valutazione dei trattamenti e dei detergenti (PACE) intendiamo fornire ai nostri clienti validi suggerimenti per garantire un efficace protocollo di pulizia. STERIS progetta il protocollo definendo i parametri in base al tipo di sostanza chimica, alla concentrazione, ai tempi di pulizia, alla temperatura, al metodo di pulizia e alla qualità dell'acqua. PACE costituisce il primo passo essenziale per qualsiasi procedura di pulizia.

Proprietà fisiche

Forma	Liquido giallo chiaro/trasparente
Odore	Leggermente chimico
Gravità specifica (25°C)	1,26
pH - soluzione all'1%	12,4
Solubilità	Completa
Potere schiumogeno	Nessuno
Risciacquo	Eccellente
Fosfati	Nessuno

Informazioni per l'ordine

4 x 3,78 litri	1D10-08EC
Secchio da 18,93 litri	1D10-05EC
Fusto da 113,55 litri	1D10-02CA
Fusto da 208,18 litri	1D10-01EC
Tanica da 1135,5 litri	1D10-P7EC

STERIS Corporation è un fornitore mondiale di sistemi, prodotti e servizi per il controllo della contaminazione rivolti al settore farmaceutico, biotecnologico, al mercato dei dispositivi medici, alla ricerca di laboratorio e al mercato industriale. Le soluzioni che offriamo coprono tutti gli aspetti della creazione e sviluppo dei prodotti, all'interno del laboratorio di ricerca, del laboratorio di ricerca animale e delle fasi della produzione.

Uffici STERIS nel mondo

America latina	305 442 8202
Benelux	32 2 523 2488
Canada	800 661 3937
Francia	33 1 44 882688
Germania	49 2233 69990
Giappone	81 78 321 2271
Italia	39 02 2130341
Paesi nordici	358 9 25851
Regno Unito	44 1256 840400
Singapore	65 68 41 7677
Spagna	34 916 585 920
Svezia	46 152 228 30

ID pubblicazione n. M1595IT.2003-03, Rev. A
©2003 da STERIS Corporation. (2500)
Tutti i diritti riservati.

Tecnologie per la Prevenzione di Infezione e Contaminazioni™



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA
440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com