

CIP 200®

Formulated Acid Cleaner

(détergent acide)



Le détergent acide CIP 200 est un détergent à hautes performances, conçu pour les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique et pour toutes les autres industries nécessitant un nettoyage efficace. Ce produit se compose d'acide phosphorique, d'agents tensioactifs et de chélateurs, en plus d'autres ingrédients essentiels. Il a un faible pouvoir moussant et est conçu pour être utilisé dans des applications à haute pression. Un ensemble de support de validation complet est disponible pour répondre à vos objectifs d'analyse.

Applications

- Matériel de production
 - Récipients de production
 - Réacteurs
 - Mélangeurs
 - Presses à comprimés
- Élimination du rouge et passivation
- Utilisation en machine à laver
- Lavage à ultrasons
- Nettoyage de la verrerie

Caractéristiques

Avantages

Détergent acide.

Permet l'utilisation des méthodes spécifiques et non spécifiques de détection des résidus de détergent. Parmi ces méthodes figurent la chromatographie liquide à haute performance (HPLC), la conductivité et la méthode par le carbone organique total (TOC).

Fabriqué conformément aux normes de la FDA et ISO 9001.

Rinçage aisé.

Traçabilité de lots complète.

Garantie d'intégrité du produit.

Détergent utilisant des concentrations de 1 à 5 %.

Nettoyage par plusieurs composants chimiques.

Allège le processus de validation en évitant aux clients le développement de leurs propres méthodes analytiques.

Répond aux normes les plus avancées en matière de fabrication et d'assurance qualité.

S'élimine facilement de la surface traitée. Permet un gain de temps et une réduction de la consommation d'eau.



Répond aux critères d'assurance et de contrôle de la qualité.

Stabilité de formulation et d'approvisionnement permanent garantie.

Un nettoyage efficace réduit les coûts et les durées d'immobilisation du matériel.

Assistance technique

Une équipe hautement qualifiée de chimistes, de microbiologistes et d'ingénieurs reconnus est à votre disposition pour toute consultation sur les produits et les traitements. L'assistance technique STERIS organise actuellement des séminaires sur site et hors site autour des thèmes du nettoyage et de la validation des procédés de nettoyage. Une importante bibliothèque de données techniques, de rapports de laboratoire, de méthodes analytiques et d'études de cas a été développée. Elle comprend, entre autres, des données sur la cytotoxicité, les doses létales (DL 50) et la compatibilité des substrats.

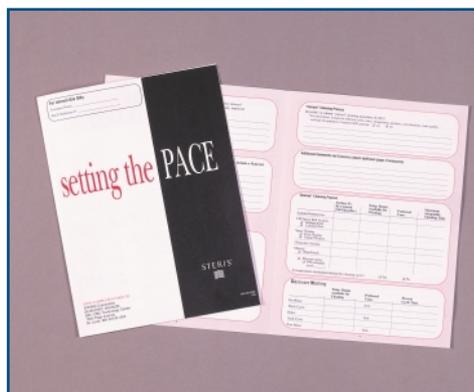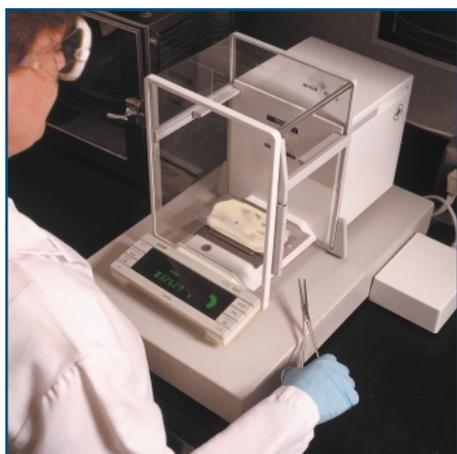

Programme PACE

Le programme PACE d'évaluation des paramètres de nettoyage est conçu pour fournir à nos clients des recommandations aux fins d'établissement d'un protocole efficace de nettoyage. STERIS élabore ce protocole en définissant des paramètres sur la base du type chimique, de la concentration, de la durée de nettoyage, de la température, de la méthode de nettoyage et de la qualité de l'eau. PACE constitue une première étape essentielle à toute application de nettoyage.

Propriétés physiques

Forme	liquide clair/incolore
Odeur	légèrement chimique
Poids spécifique (25°C)	1,34
pH – solution à 1 %	2,0
Solubilité	complète
Mousse	faible et contrôlée
Rinçage	excellent

Conditionnements

Bidon de 18,93 litres	1D20-05EC
Fût de 208,18 litres	1D20-01EC
Cuve de 1 135,5 litres	1D20-P7EC

STERIS Corporation fournit au niveau mondial des systèmes, des produits et des services de prévention de la contamination pour les appareillages médicaux, biotechniques, pharmaceutiques, de laboratoire de recherche et pour les marchés industriels. Nos solutions couvrent tous les aspects : de la découverte jusqu'au développement des produits, en passant par la recherche en laboratoire et sur les animaux, pour arriver à la fabrication et à la production des traitements adéquats.

Représentations STERIS dans le monde

Allemagne	49 2233 69990
Amérique Latine	305 442 8202
Benelux	32 2 523 2488
Canada	800 661 3937
Espagne	34 916 585 920
France	33 1 44 882688
Italie	39 02 2130341
Japon	81 78 321 2271
Royaume-Uni	44 1256 840400
Scandinavie	358 9 25851
Singapour	65 68 41 7677
Suède	46 152 228 30

N° de publication : M1597FR.2003-03, Rév. A
© 2003 STERIS Corporation. (2500)
Tous droits réservés.

Technologies pour la prévention de l'infection et de la contamination™



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ États-Unis
440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com