



AFFIDABILITÀ

L'affidabilità è un requisito chiave per qualsiasi laboratorio di ricerca. In STERIS, l'affidabilità inizia nella nostra Fabbrica certificata ISO 9001 con una rigorosa ispezione finale presso il nostro centro di collaudo all'avanguardia.

- Dalla camera e dalla camicia in acciaio inox certificate ASME/PED, fino ai componenti facilmente accessibili, FINN-AQUA 77 Series è progettato per ridurre i tempi di inattività
- Progettazione della garanzia di un anno da parte di una rete mondiale di 1000 tecnici di assistenza formati in sito

 **STERIS**

Life Sciences



FINN-AQUA® 77 Series
Sterilizzatori medi a vapore da laboratorio

 **STERIS**

STERIS CORPORATION
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060, USA
T +1 800 444 9009

www.STERISLifeSciences.com

Uffici STERIS nel mondo

Asia Pacifico	+65 (0) 68 41 7677
Canada	+1 800 444 9009
Finlandia	+358 9 25851
Francia	+33 (0) 2 38 84 85 40
Germania	+49 (0) 221 466120
Italia	+39 (0) 2 21303 424
America Latina	+1 800 444 9009
Spagna	+34 (0) 916 585 920
Regno Unito	+44 (0) 1256 840400

STERIS Life Sciences | Science & Solutions for Life

Da oltre 100 anni, STERIS è noto come leader mondiale, partner di fiducia e fornitore di soluzioni nel campo della sterilizzazione e del controllo della contaminazione. **Oggi**, STERIS procede su questi principi migliorando la **Scienza** di sterilizzazione, pulizia e controllo delle infezioni, offrendo **Soluzioni** che soddisfano le esigenze e gli standard elevati dei nostri clienti. L'impegno di STERIS è volto ad aiutarvi nel miglioramento della **Vita** dei vostri pazienti e della durata della vostra apparecchiatura. Dalle formulazioni chimiche ai beni strumentali, ai componenti e ai servizi, STERIS Life Sciences è **Science & Solutions for Life**.

© 2015 STERIS Corporation
Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma materiale senza l'autorizzazione di STERIS Corp.

La linea di sterilizzatori FINN-AQUA 77 Series è stata progettata per una sterilizzazione rapida ed efficace di materiali porosi, stabili al calore e all'umidità utilizzati nei laboratori e in applicazioni di ricerca. Lo sterilizzatore 77 Series presenta diverse caratteristiche volte alla riduzione del consumo di energia, a fornire flessibilità, facilità di utilizzo e di manutenzione, nonché garantire sicurezza e affidabilità.


SOSTENIBILITÀ

Comprendendo l'importanza della partecipazione allo sforzo globale di realizzare laboratori sostenibili, FINN-AQUA 77 Series è progettata per ridurre il consumo di acqua ed elettricità oltre all'utilizzo di spazio critico.

FLESSIBILITÀ

La varietà delle applicazioni in un tipico laboratorio di ricerca richiede processi di sterilizzazione flessibili.

- I cicli preimpostati garantiscono la sterilizzazione efficace di articoli rigidi, porosi e carichi liquidi
- Sistema di controllo basato su PLC per utilizzare con facilità lo sterilizzatore al fine di regolare e monitorare i parametri critici del sistema
- L'utente può programmare fino a un massimo di 20 cicli, offrendo la flessibilità di configurare cicli specifici per i diversi requisiti di carico
- È possibile che venga fornita una stampante per mantenere le registrazioni dei dati di trattamento del ciclo. È inoltre possibile trasferire con facilità i dati di trattamento su un computer oppure esportarli su un sistema di gestione dei dati utilizzando la porta USB integrata
- È possibile che venga fornito un generatore di vapore elettrico da 40 kW completamente integrato per gli impianti in cui è disponibile la fornitura di vapore
- Le dimensioni della camera sono 675 mm di larghezza x 675 mm di altezza e le tre lunghezze disponibili sono: 990, 1290 e 1590 mm

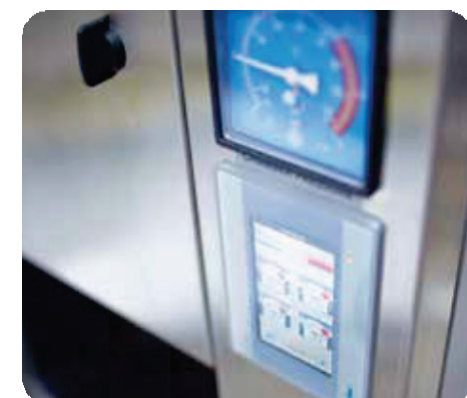

- Modalità Standby
- Funzioni di avvio e spegnimento automatiche programmabili
- Sistema elettronico di risparmio dell'acqua



FACILITÀ D'USO E DI MANUTENZIONE

Gli sterilizzatori FINN-AQUA 77 Series sono progettati sulla base della facilità d'uso.

- Sportello a scorrimento verticale automatico che è possibile aprire e chiudere con facilità mediante un pulsante
- È possibile semplificare l'accesso alle diverse funzioni di controllo utilizzando un tablet computer intuitivo
- Le tubazioni e i componenti disponibili in commercio sono facilmente accessibili dalla parte anteriore per l'esecuzione di interventi di manutenzione, riducendo al contempo i tempi di inattività complessivi

SICUREZZA

A causa della natura patogena dei materiali di scarto dei laboratori sulla biosicurezza sono necessari speciali processi di decontaminazione.

- Tenuta differenziale aria per ridurre al minimo il flusso dell'aria tra le zone non sterili e sterili
- È possibile che venga fornita BioSeal per realizzare una barriera ermetica tra le zone calde e fredde
- Il ciclo di decontaminazione garantisce che non vengano rilasciati rifiuti o aria contaminata nell'ambiente
- Il sistema di decontaminazione dell'aria Virasure™ offre una sicurezza dei processi senza pari, grazie alla combinazione di processi di incenerimento e filtrazione

