

CIP 200®

Formulated Acid Cleaner

(Limpiador de fórmula ácida)



El limpiador de fórmula ácida CIP 200 es un detergente de altas prestaciones, diseñado para su uso en la industria farmacéutica, biotecnológica, cosmética y de otros tipos que precisan un limpiador efectivo y validable. La formula de este producto incluye ácido fosfórico, agentes limpiadores surfactantes, agentes quelantes y otros ingredientes básicos. Genera escasa espuma, por lo que está diseñado para su utilización en aplicaciones a alta presión. Se dispone de un amplio paquete de soporte de validación para cubrir objetivos analíticos específicos.

Aplicaciones

- Equipos de procesado
 - Recipientes de procesado
 - Reactores
 - Mezcladores
 - Prensas de comprimidos
- Desincrustación y pasivación
- Limpieza de componentes
- Lavado ultrasónico
- Cristalería de laboratorio

Características

Beneficios



Limpiador de fórmula ácida.	Limpia con un amplio espectro de productos químicos.
Se dispone tanto de métodos específicos como no específicos para detectar los residuos del agente limpiador. Los métodos incluyen HPLC, TOC, conductividad, etc.	Ayuda en el proceso de validación al disminuir la necesidad del cliente de desarrollar su propio método analítico.
Fabricado en instalaciones validadas por la FDA con certificado ISO 9001.	Cumple los más exigentes estándares en fabricación y seguridad de calidad.
Sin aclarado.	Fácilmente eliminable de las superficies de los materiales. Ahorra tiempo y reduce el consumo de agua.
Total trazabilidad del lote.	Mantiene la seguridad y control de calidad.
Compromiso de integridad del producto.	Ofrece integridad en la formulación y un suministro futuro continuado.
Los procesos de limpieza utilizan un intervalo de dilución entre 1% y 5%.	La limpieza eficiente reduce el tiempo de parada del equipo y ahorra gastos.

STERIS®



Soporte técnico

Existe a disposición del usuario un equipo altamente cualificado de químicos, microbiólogos e ingenieros, avalado por la industria, para responder a consultas sobre productos y procesos. El Soporte Técnico de STERIS está organizando actualmente seminarios, tanto en instalaciones del usuario como externos, con temario centrado en los procesos de limpieza y su validación. Se ha desarrollado una amplia biblioteca de datos técnicos, informes de laboratorio, métodos analíticos y estudios de casos, entre los que se tratan la citotoxicidad, la LD 50, la compatibilidad de sustratos, etc.

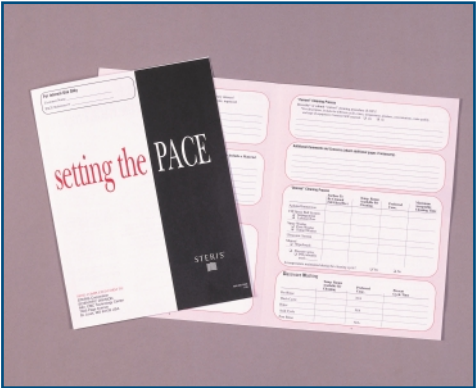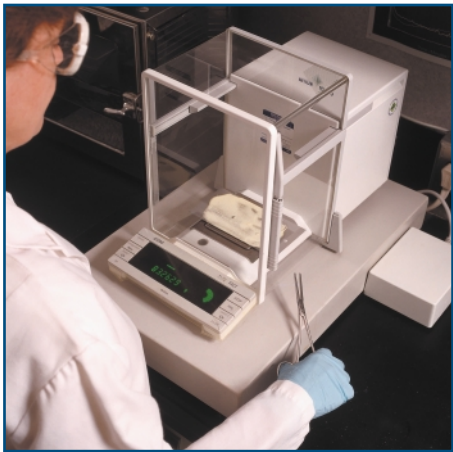

Programa PACE

El programa de Evaluación de procesos y limpieza, PACE, (Process And Cleaner Evaluation) se ha diseñado para proporcionar a nuestros clientes recomendaciones sobre un protocolo de limpieza efectivo. STERIS ha diseñado este protocolo definiendo los parámetros según el tipo de producto químico, la concentración, la duración de la limpieza, la temperatura, el método de limpieza y la calidad del agua. El programa PACE es un primer paso fundamental para cualquier aplicación de limpieza.

Propiedades físicas

Forma	Líquido transparente e incoloro
Olor	Ligero, a producto químico
Densidad a 25°C	1,34
pH – solución al 1%	2,0
Solubilidad	Total
Espuma	Escasa y controlada
Aclarado	Excelente

Información para pedidos

Cubo de 18,93 litros	1D20-05EC
Tambor de 208,18 litros	1D20-01EC
Contenedor de 1.135,5 litros	1D20-P7EC

STERIS Corporation es un proveedor mundial de sistemas de control de la contaminación, productos y servicios para los mercados farmacéutico, biotecnológico, de dispositivos médicos, laboratorios de investigación e industria en general. Nuestras soluciones cubren todos los aspectos del descubrimiento y desarrollo de productos, a través de laboratorios de investigación, laboratorios de investigación animal y procesos de producción o fabricación.

Oficinas de STERIS en el mundo	
Alemania	49 2233 69990
Benelux	32 2 523 2488
Canadá	800 661 3937
España	34 916 585 920
Francia	33 1 44 882688
Italia	39 02 2130341
Japón	81 78 321 2271
Latinoamérica	305 442 8202
Países Nórdicos	358 9 25851
Reino Unido	44 1256 840400
Singapur	65 68 41 7677
Suecia	46 152 228 30

ID de la publicación: #M1597ES.2003-03, Rev. A
©2003 STERIS Corporation. (2500)
Reservados todos los derechos.

Tecnologías para Prevenir la Infección y la Contaminación™

STERIS®

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ EE.UU.
440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com