

ProKlenz[®] ONE

Detergente alcalino ad alte prestazioni

Detergente alcalino ad alte prestazioni formulato per rimuovere residui di processo di difficile rimozione



Descrizione

Il detergente alcalino ProKlenz ONE è formulato specificatamente per soddisfare le particolari esigenze di pulizia del settore farmaceutico, biotecnologico, cosmetico, nutraceutico e degli altri settori che necessitano di un detergente efficace e convalidabile. Una miscela esclusiva composta da una fonte di alcalinità concentrata, un sistema tensioattivo avanzato e altri ingredienti che contribuiscono al miglioramento delle prestazioni, offre ampie possibilità di pulizia. Questo prodotto a basso potere schiumogeno rimuove una vasta gamma di residui di processo, dai derivati della fermentazione alle emulsioni e ai lubrificanti a base siliconica, ed è ideale per l'impiego in applicazioni "in loco" (CIP) e "non in loco" (COP). Per soddisfare i vostri obiettivi di convalida STERIS rende disponibile un ampio kit di assistenza.

Caratteristiche

Vantaggi

Applicazioni

Detergente alcalino formulato.	Deterge in presenza di una vasta gamma di residui grazie a molteplici proprietà di pulizia. Efficace in acqua dura
Basso potere schiumogeno.	Può essere impiegato in applicazioni spray ad alta pressione.
Risciacquo libero con tensioattivi analizzabili tramite HPLC.	Può essere rimosso senza difficoltà dalle superfici, consentendo un risparmio in termini di tempo e consumi. Semplifica la convalida della pulizia.
Disponibilità di metodi sia specifici che non specifici per individuare i residui di detergente. Tra i diversi metodi figurano l'HPLC, il TOC, ecc.	Fornisce metodi analitici rappresentativi per semplificare il processo di convalida.
Contiene agenti tensioattivi e chelanti biodegradabili.	Ecologico. Conforme alla normativa (CE) N. 648/2004 sui detersivi. Una scelta eccellente per uniformare il processo di convalida della pulizia a livello globale.
Prodotto all'interno di una struttura dotata di certificazione FDA ed ISO 9001/13485, conforme alle condizioni cGMP.	Rispetta il più alto standard di produzione e processo.
Completa rintracciabilità dei lotti.	In linea con gli standard richiesti dall'assicurazione qualità (QA) e il controllo qualità (QC).

- > Strumenti per la produzione
 - Contenitori di processo
 - Reattori
 - Miscelatori
- > Pulizia di componenti
- > Lavaggio di vetreria
- > Lavaggio ad ultrasuoni



STERIS[®]



Technology of Clean[®]

Assistenza tecnica

Per la consulenza sui prodotti e sui processi, potete contare su un'équipe di chimici, microbiologi ed ingegneri altamente qualificati e riconosciuti nel settore. L'assistenza tecnica STERIS organizza seminari (in azienda ed esterni) su tematiche incentrate sulle procedure di pulizia e sulla loro convalida (cleaning validation). È a disposizione del cliente un'ampia varietà di dati tecnici, referti di analisi di laboratorio, metodi analitici e case study tra cui tossicità e compatibilità su superfici.

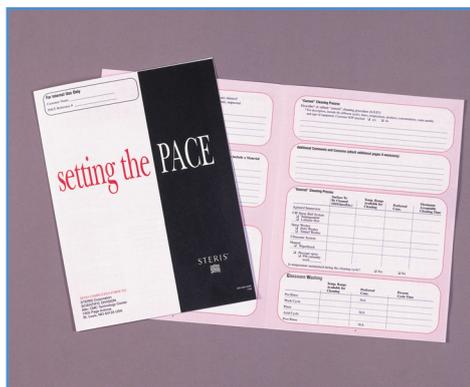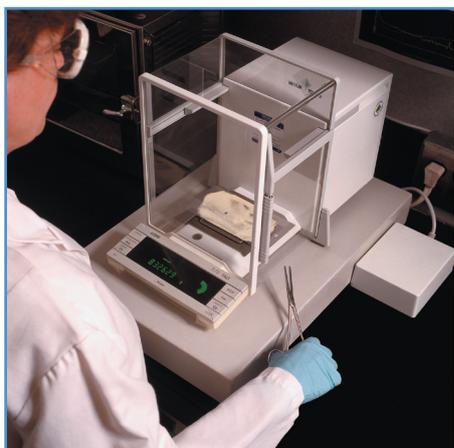

I nostri servizi di supporto tecnico includono anche il programma di valutazione dei processi e dei detergenti (PACE®) ideato per fornire ai nostri clienti validi suggerimenti per garantire un efficace protocollo di pulizia. Una volta completato il processo di valutazione, STERIS fornisce un report che aiuta i clienti a sviluppare un protocollo di cleaning definendo i parametri in base al tipo di detergente, alla concentrazione, ai tempi di contatto, alla temperatura, al metodo ed alla qualità dell'acqua. Il programma PACE costituisce il primo passo essenziale per qualsiasi procedura di pulizia.

Proprietà fisiche

Forma	Da giallo chiaro a color ambra
Odore	Nessuno
Gravità specifica 25° (77°F)	1,19
pH tipico (soluzione all'1%)	12,5
Solubilità tipica	Completa
Potere schiumogeno	Basso a tutte le temperature
Risciacquo	Eccellente
Fosfati	Nessuno, 0% P

Formati disponibili

Fusto da 18,93 litri (5 galloni)	1421-05EC
Fusto da 208,18 litri (55 galloni)	1421-01EC
Contenitore riciclabile da 1135,50 litri (300 galloni)	1421-D3EC

STERIS Corporation è un fornitore mondiale di sistemi, prodotti e servizi per il controllo della contaminazione rivolti al settore farmaceutico, biotecnologico, al mercato dei dispositivi medici, alla ricerca di laboratorio e al mercato industriale. Le soluzioni che offriamo coprono tutti gli aspetti della ricerca e dello sviluppo dei prodotti, all'interno del laboratorio, della medicina comparata e delle fasi di produzione.

STERIS®



STERIS Corporation
Life Sciences
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA
440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com

STERIS S.r.l.
Centro Direzionale Milano Oltre
Palazzo Caravaggio
Strada Cassanese, 224
20090 Segrate (MI)
Italia
Tel: +39 02 213 034 1
Fax: +39 02 213 034 84
www.steris.com

UFFICI STERIS NEL MONDO

America Latina	800 884 9550	Giappone	81 78 321 2271
Benelux	32 2 523 2488	Italia	39 02 2130341
Brasile	5511 5053 9823	Paesi nordici	358 9 25851
Canada	800 661 3937	Regno Unito	44 1256 840400
Cina	86 21 6340 6363	Singapore	65 68 41 7677
Francia	33 1 55 17 60 00	Spagna	34 916 585 920
Germania	49 2203 890 6969	Svezia	46 152 228 30

Documento M3109IT.2007-3, Rev. A

©2007 STERIS Corporation.
Tutti i diritti riservati.